

Vapocid[®]-Tray System



MEDITECH AG



Die überzeugend einfache und günstige Lösung für die Sterillagerung von Instrumenten mit dem Dreifachnutzen: Arbeitstray, Waschtray und Sterilverpackung




Modernen Hygieneanforderungen nachzukommen ist in vielen Fällen technisch schwierig oder kostspielig. Das patentierte Vapocid-Tray® bietet hier eine wirkliche Lösung, denn es erlaubt eine Dreifachnutzung: als Waschtray, (z.B. in Thermodesinfektoren), als normales Arbeitstray und als Sterilverpackung innerhalb eines Tray-Systems. Es werden damit die höchsten ökonomischen und ökologischen Anforderungen erfüllt.

(Siehe Bericht Schweiz.Monatszeitschr. Zahnmed. S 1061 bis 1072 Vol.109 10/99).



Durch die individuelle Bestückung kann jedes Arbeitstray optimal ausgerüstet werden. Die Kunststoffhalterungen fixieren die Instrumente auch in Schräglage. Zum Waschen und Desinfizieren kann ein Waschdeckel verwendet werden. Somit wird kein zusätzlicher Waschkorb benötigt. Das Vapocid-Tray® ist stapelbar, platzsparend beim Transport und der Lagerung.

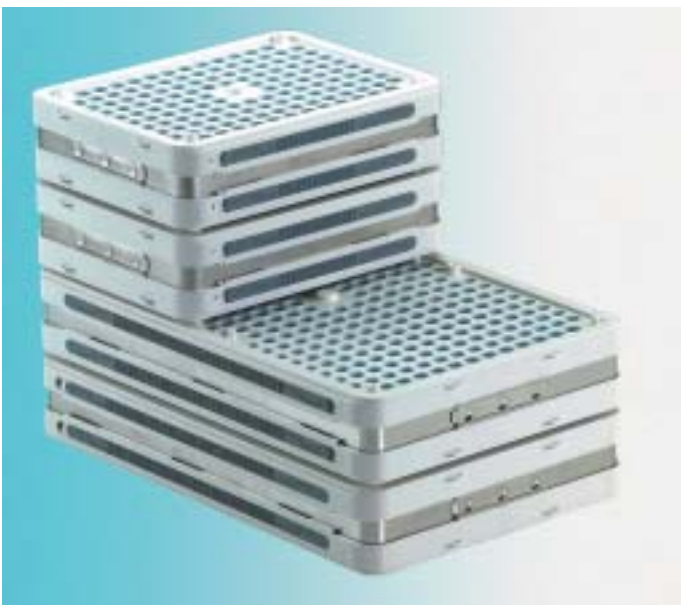

Das Vapocid-Tray® (CE konform) ist in verschiedenen Grössen und Materialien lieferbar:


Art.Nr. 38501 - 1/1 - Normtray (288 x 189 x 47 mm)

Art.Nr. 38502 - 1/2 - Normtray (189 x 144 x 47 mm)
komplett in Edelstahl

Art.Nr. 38525 - 1/1 - Normtray in Edelstahl

Art.Nr. 38523 - 1/2 - Normtray in Edelstahl
beide mit Kunststoffdeckel (oben+unten)

Eine spätere Umrüstung der Kunststoff-Deckel auf Edelstahl ist jederzeit möglich.

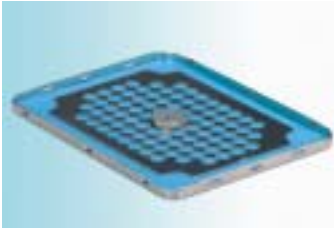

Aufbau des Vapocid®-Trays


Edelstahl-Deckel (oben und unten) mit Filter und Filterhalter



Edelstahl-Arbeits-, Wasch-, Desinfektions- und Steriltray mit zwei Schilderhalter für Beschriftung



Edelstahl-Verschlussklammern mit Etikettierungsfläche für Chargennummer und Indikations-Etikette

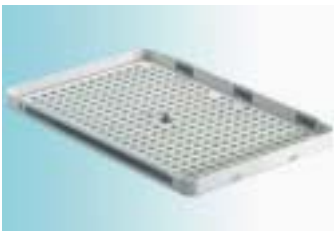

Aufbau Deckel (oben + unten) zur Sterilhaltung

Kunststoffdeckel mit Dichtnut, Verschlusschieber und -Schraube für Filterhalter. Dieser Deckel wird auch als Waschdeckel eingesetzt.



Filter mit aufgeschweisster Silikondichtung. Für Mehrfachverwendung geeignet. Durch den Wegfall der Einmal-Verpackung reduzieren sich die Abfallentsorgungskosten erheblich. (Reduktion der Umweltbelastung)



Filterhalter aus Edelstahl zum Schutz des Filters. (Beschleunigt den Sterilisationsvorgang).



Instrumentenhalter aus Kunststoff (einfache Montage)



Sicherungsverschluss (Beispiel) auf Anfrage




Edelstahlschild zur Beschriftung



*CNC Spezialmaschine zur
Aufbringung der Dichtmasse*



*Herstellung der Filter für das
patentierete Vapocid®-Tray System*

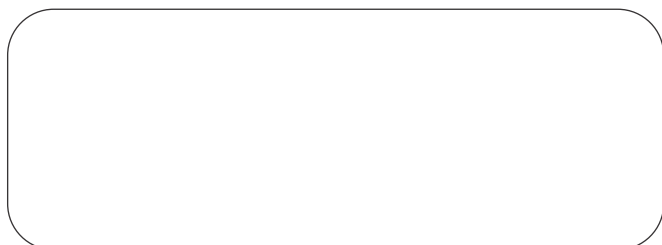

OMB MEDITECH AG
Industrie Hofacker, CH-9606 Bütschwil · Switzerland
Tel: +41-71-982-7201
Fax: +41-71-982-7202
URL: www.omb-meditech.com
eMail: sales@omb-meditech.com