

OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker
 CH-9606 Bütschwil · Switzerland
 Tel: +41-71-980-0206 GSM: +41-79-631-0865
 Fax: +41-71-980-0205 Fax2: +41-71-982-7205
 e-Mail: sales@omb-meditech.com



► [Home](#) ► [Deutsch](#) ► [English](#) ► [Français](#) ► [L'Italiano](#)

Vapocid®-Tray System STANDARD



Die überzeugend einfache und günstige Lösung für die Sterillagerung von Instrumenten mit dem Dreifachnutzen:

Arbeitstray, Waschtray und Sterilverpackung



ARBEITS-TRAY



WASCH-TRAY



STERIL-TRAY



Modernen Hygieneanforderungen nachzukommen ist in vielen Fällen technisch schwierig oder kostspielig. Das patentierte Vapocid-Tray® bietet hier eine wirkliche Lösung, denn es erlaubt eine Dreifachnutzung:

als Waschtray, (z.B. in Thermodesinfektoren), als normales Arbeitstray und als Sterilverpackung innerhalb eines Tray-Systems.


Es werden damit die höchsten ökonomischen und ökologischen Anforderungen erfüllt.

(Siehe Bericht Schweiz. Monatszeitschr. Zahnmed. S 1061 bis 1072 Vol.109 10/99).



Durch die individuelle Bestückung kann jedes Arbeitstray optimal ausgerüstet werden. Die Kunststoffhalterungen fixieren die Instrumente auch in Schräglage. Zum Waschen und Desinfizieren kann ein Waschdeckel verwendet werden.

Somit wird kein zusätzlicher Waschkorb benötigt. Das Vapocid-Tray® ist stapelbar, platzsparend beim Transport und der Lagerung.

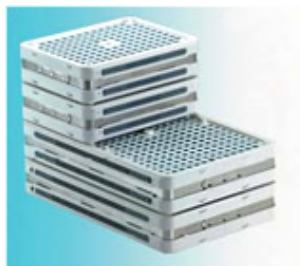

Das Vapocid-Tray® (CE konform) ist in verschiedenen Grössen und Materialien lieferbar:

Art.Nr. 38501 - 1/1 - Normtray (288 x 189 x 47 mm)

Art.Nr. 38502 - 1/2 - Normtray (189 x 144 x 47 mm)

komplett in Edelstahl

Art.Nr. 38525 - 1/1 - Normtray in Edelstahl

Art.Nr. 38523 - 1/2 - Normtray in Edelstahl

beide mit Kunststoffdeckel (oben+unten)

Eine spätere Umrüstung der Kunststoff-Deckel auf Edelstahl ist jederzeit möglich.

◀ [zurück](#) [weiter](#) ▶

OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker

CH-9606 Bütschwil · Switzerland

Tel: +41-71-980-0206

Fax: +41-71-980-0205



Skype-Name: **vapocid**

GSM: +41-79-631-0865

Fax: +41-71-982-7205


OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker
 CH-9606 Bütschwil · Switzerland
 Tél: +41-71-980-0206 GSM: +41-79-631-0865
 Fax: +41-71-980-0205 Fax2: +41-71-982-7205
 e-Mail: sales@omb-meditech.com



► [Home](#) ► [Deutsch](#) ► [English](#) ► [Français](#) ► [L'Italiano](#)


Vapocid®-Tray System STANDARD

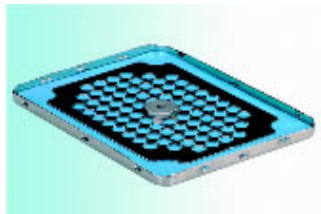

Aufbau des Vapocid®-Trays Edelstahl-Deckel (oben und unten) mit Filter und Filterhalter.




Edelstahl-Arbeits-, Wasch-, Desinfektions- und Steriltray mit zwei Schilderhalter für Beschriftung.

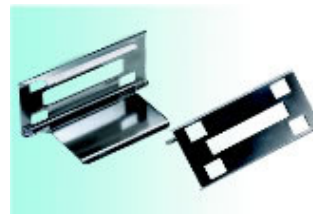


Edelstahl-Verschlossklammern mit Etikettierungsfläche für Chargennummer und Indikations-Etikette.



Aufbau Deckel (oben + unten) zur Sterilhaltung Kunststoffdeckel mit Dichtnut, Verschlusschieber und -Schraube für Filterhalter. Dieser Deckel wird auch als Waschdeckel eingesetzt.

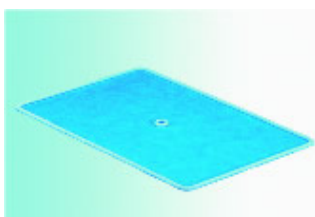

Filter mit aufgeschweisster Silikondichtung. Für Mehrfachverwendung geeignet. Durch den Wegfall der Einmal-Verpackung reduzieren sich die Abfallentsorgungskosten erheblich. (Reduktion der Umweltbelastung)

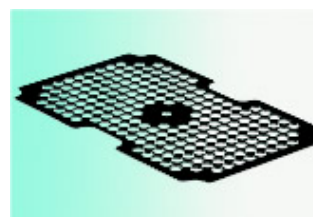


Filterhalter aus Edelstahl zum Schutz des Filters. (Beschleunigt den Sterilisationsvorgang).



Instrumentenhalter aus Kunststoff (einfache Montage)



Sicherungsverschluss (Beispiel) auf Anfrage

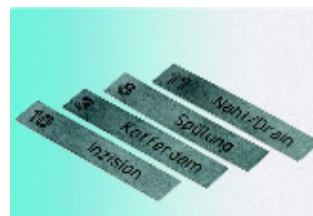

Edelstahlschild zur Beschriftung

► [Ansicht / Druck](#)
[Adobe Acrobat Datei](#)

◀ [zurück](#)

OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker

CH-9606 Bütschwil · Suisse

Tel: +41-71-980-0206

Fax: +41-71-980-0205



Nom Skype: **vapocid**

GSM: +41-79-631-0865

Fax2: +41-71-982-7205