


OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker
 CH-9606 Bütschwil · Suisse
 Tél: +41-71-980-0206 GSM: +41-79-631-0865
 Fax: +41-71-980-0205 Fax2: +41-71-982-7205
 e-Mail: sales@omb-meditech.com



► [Accueil](#) ► [Deutsch](#) ► [English](#) ► [Français](#) ► [L'Italiano](#)

Le système Vapocid® "STANDARD"

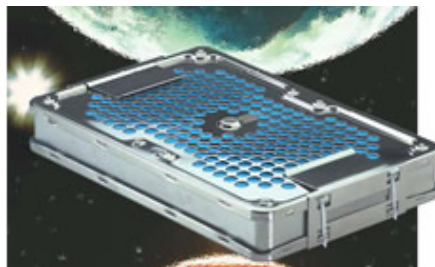

La solution facile et peu coûteuse pour le stockage stérile de vos instruments. Une solution "3 en 1" :

Plateau de travail + plateau de lavage + enveloppe stérile



Plateau de travail



Plateau de lavage



Enveloppe stérile



Techniquement, satisfaire aux critères d'hygiène d'aujourd'hui est souvent compliqué, et coûteux. Le plateau-cassette Vapocid® (système breveté) est dans ce domaine la solution idéale car c'est un « 3 en 1 », que vous pouvez utiliser comme:

plateau de lavage (pour la stérilisation par exemple), plateau de travail et comme enveloppe stérile.

De ce fait, il répond aussi aux critères économiques et écologiques les plus poussés.


(Voir article paru dans le Schweiz. Monatszeitschr. Zahnmed., pages 1061 à 1072, Vol.109,10/99);



Vous pouvez remplir chaque plateau de travail Vapocid® comme vous le souhaitez et donc l'exploiter au maximum. Les supports en plastique vous permettent de placer les instruments en position inclinée. Pour le lavage et la stérilisation, le plateau est équipé d'un couvercle spécial.

Plus besoin de panier donc !

De plus, le plateau-cassette Vapocid® étant empilable, il prend moins de place lors de son transport et de son stockage.

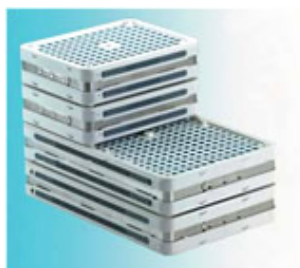

Le plateau-cassette Vapocid® (conforme à la réglementation CE) vous est proposé dans différents formats et matériaux :

Réf. Art. 38501 – Plateau-cassette normalisé 1/1 (288 x 189 x 47 mm)

Réf. Art. 38502 – Plateau-cassette normalisé 1/2 (189 x 144 x 47 mm)

Entièrement en acier inoxydable

Réf. Art. 38525 – Plateau-cassette normalisé 1/1, en acier inoxydable

Réf. Art. 38523 – Plateau-cassette normalisé 1/2, en acier inoxydable

Ces deux articles ont chacun des couvercles inférieur et supérieur en plastique.

Vous pourrez les remplacer à tout moment par des couvercles en acier inoxydable si vous le souhaitez.

◀ [Précédent](#) [Suivant](#) ▶




OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker
 CH-9606 Bütschwil · Suisse
 Tél: +41-71-980-0206 GSM: +41-79-631-0865
 Fax: +41-71-980-0205 Fax2: +41-71-982-7205
 e-Mail: sales@omb-meditech.com



► [Accueil](#) ► [Deutsch](#) ► [English](#) ► [Français](#) ► [L'Italiano](#)


Le système Vapocid® "STANDARD"

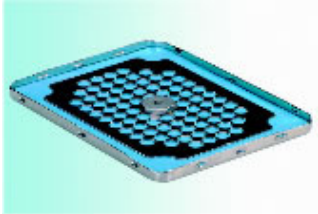

Le couvercle en acier inoxydable. Il y en a un pour le haut et un pour le bas du plateau-cassette Vapocid®. Ces deux couvercles sont avec filtre et porte-filtre.




Le plateau-cassette, en acier inoxydable, sert de plateau de lavage, de désinfection et de stockage stérile. Il possède deux porte-plaques (plaques d'identification).

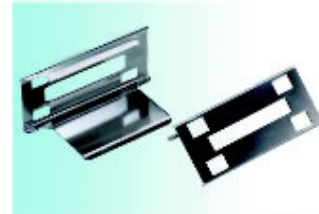

Fermeurs à clic en acier inox, avec zone "étiquetage" (numéro de charge et autres indications).




Couvercle en plastique pour la conservation stérile. Il y en a un pour le haut et un pour le bas du plateau-cassette. Ce couvercle – équipé d'un rainurage d'étanchéité, d'un fermetoir coulissant et d'une vis de fixation du porte-filtre – sert aussi de couvercle pour le lavage.

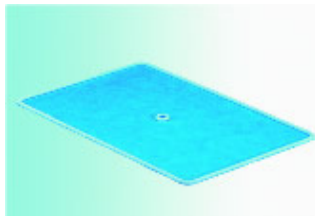

Filtre avec joint silicone soudé.

Ce filtre est réutilisable de nombreuses fois. D'où moins d'emballages à usage unique et donc bien moins de frais d'élimination de ces déchets. (Et donc, une solution écologique aussi !)

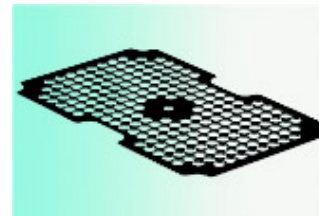


Porte-filtre en acier inoxydable servant à protéger le filtre. (Permet une stérilisation plus rapide).



Supports pour les instruments faciles à installer. Ils sont en plastique



Exemples de fermeurs également disponibles (nous consulter).

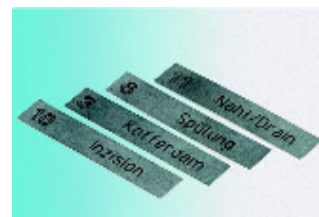

Plaques d'identification (acier inoxydable)

► [Afficher/imprimer fichier Adobe Acrobat](#)

◀ [Précédent](#)

OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker

CH-9606 Bütschwil · Suisse

Tél: +41-71-980-0206

Fax: +41-71-980-0205



Nom Skype: **vapocid**

GSM: +41-79-631-0865

Fax2: +41-71-982-7205